



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 26386 System masażu kompresyjnego inSPORTline Compisimo



SPIS TREŚCI



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	3
PANEL STEROWANIA LED.....	4
RODZAJE MASAŻU	5
UŻYTKOWANIE	5
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używać w pomieszczeniu, w którym występują gazy łatwopalne lub wybuchowe.
- Nie stosować jeśli cierpisz na: ostre stany zapalne skóry, zaburzenia rytmu, chorobę rumieniową, zakrzepicę żylną, obrzęk płuc, ostrą zakrzepicę żylną, niestabilne nadciśnienie, osoby z rozrusznikiem serca, żyłaki, posiadające metalowe implanty lub inne urządzenia elektroniczne.
- Możliwe skutki uboczne: dyskomfort przy wysokim ciśnieniu, zaczerwienienie, swędzenie, ból przy zbyt wysokim ciśnieniu.
- Nie nadaje się dla osób z ograniczonymi zdolnościami motorycznymi lub umysłowymi.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
- Jeśli poczujesz dyskomfort lub ból, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Nie używać w sposób ciągły dłużej niż 20 minut. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie stosowania.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Trzymać z dala od wody i wilgoci.
- Przewód zasilający należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka.
- Zasilanie 220-240V.
- Trzymaj ręce suche podczas obsługi przewodu zasilającego.
- Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła i innych metali.
- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.
- Nigdy nie używaj produktu na gołej skórze.
- To nie jest pomoc medyczna.
- Przed użyciem należy odkręcić śruby zabezpieczające, które służą do bezpiecznego transportu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	
Jednostka główna	Kompresja na nogi


	
Kompresja na ręce	Kompresja talii

PANEL STEROWANIA LED





1. Timer 10, 20, 30 min	5. Typ programu A - F
2. Wskaźnik intensywności, 8 poziomów (0-250 mmHg)	6. Pozycja masująca
3. Zwiększ intensywność	7. Zmniejsz intensywność
4. Zasilanie	8. Start/pauza

Wskaźnik czasu pokazuje pozostały czas masażu

Naciskając przycisk  można dostosować czas treningu od 10 do 60 min. Każde naciśnięcie zmienia wartość o 10 min

Wskaźnik i ustawienie intensywności

Za pomocą przycisków  i  wyreguluj intensywność o 10 mmHg, oryginalnie ustawiona wartość to 120 mmHg

Pozycja do masażu

Ustawieniem domyślnym jest masaż wszystkimi 4 komorami. Naciśnij przycisk, aby uruchomić/zatrzymać daną komorę.

Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu gotowości, naciśnij ponownie, aby wyłączyć.



Start / pauza

W trybie gotowości przycisk jest zielony.

Jeśli masaż jest uruchomiony, przycisk jest niebieski.

Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub rozpocząć masaż.

Rodzaj masażu

Naciśnij przycisk, aby wybrać rodzaj masażu A - F      .

RODZAJE MASAŻU

Typ A: masaż relaksacyjny.


Typ B: pomaga złagodzić ból żyłaków.

Typ C: głęboki masaż regenerujący mięśnie.

Typ D: pomaga schudnąć w kończynach górnych i dolnych oraz w talii.

Typ E: wspomaga krążenie krwi.

Typ F: kombinacja rodzajów masażu A+C+D.

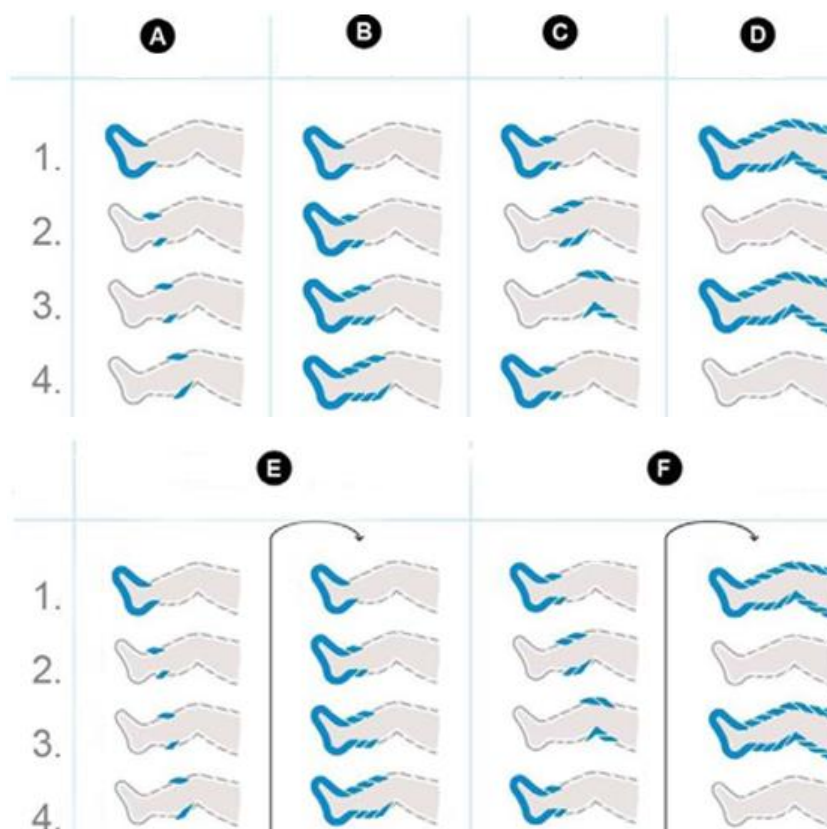

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem należy odkręcić śrubę transportową. Otwórz pokrywę i odkręć śrubę.



- Umieść urządzenie na płaskiej i twardej powierzchni.
- Podłącz zasilanie i podłącz rurkę do urządzenia i danej tulejki zaciskowej.

- Kompresja na nogi:
- Aby uniknąć nieprzyjemnego uczucia, upewnij się, że rękaw uciskowy jest złożony.
- Noś cienką warstwę ubrania.
- Zapnij zamek błyskawiczny na całej długości. Podłącz wąż do tulei i do urządzenia. Urządzenie powinno zawsze być skierowane wyświetlaczem w Twoją stronę.
- Włącz urządzenie, ustaw czas masażu, intensywność, ilość komór i rodzaj masażu. Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć masaż. (tryb czuwania – kolor zielony, podczas pracy – kolor niebieski).

Krok 1 Podłącz do źródła zasilania 220-240 V.	Krok 2 Sprawdź połączenie węża, jeśli jest podłączone, pomiń krok 3.
Krok 3 Podłącz wąż do jednostki kompresyjnej i urządzenia.	Krok 4 Upewnij się, że wszystkie węże są prawidłowo podłączone.
Krok 5 Założ rękaw kompresyjny. Ostrzeżenie: Nie zakładaj węża na szyję.	Krok 6 Naciśnij przycisk startu.
Krok 7 Dostosuj intensywność za pomocą przycisków + i -. Uwaga: Na początku zalecamy stosowanie niższego ciśnienia 120-150 mmHg.	Krok 8 Ustaw minutnik. Uwaga: Zakres 10 – 60 min. Wartość pierwotna 10 min. Jeżeli licznik czasu osiągnie 0, urządzenie wyłączy się.
Krok 9 Wybierz tryb.	Krok 10 Wybierz liczbę komór. Uwaga: Naciskając przycisk wybierz liczbę komór masujących.
Krok 11 Jeśli maszyna pracuje, naciśnij przycisk Start/Stop, aby zatrzymać masaż. Uwaga: Nie należy zdejmować tulei uciskowej, gdy urządzenie jest zapauzowane. Przed demontażem urządzenie należy wyłączyć.	Krok 12 Po zakończeniu odłącz wąż.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie uruchamia się	Sprawdź połączenie przewodu zasilającego. Sprawdź, czy urządzenie działa. Sprawdź aktualne napięcie. Urządzenie wyłączyło się automatycznie po wyłączeniu timera
Nienaturalne dźwięki (syczenie itp.)	Sprawdź podłączenie i stan węża. Sprawdź stan złączy

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieźniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

