



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 26796 Lampa LED na podczerwień na statywie
inSPORTline Elbasan



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie stosować w miejscach o dużej wilgotności lub w wodzie (baseny, sauny itp.)
- Nie zanurzać w wodzie.
- Nie używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie zakrywać lampy i nie używać jej, jeśli jesteś zmęczony.
- Nie patrz bezpośrednio w światło.
- Nie stosować w okolicy narządów płciowych.
- Nie używaj podczas snu lub jeśli jesteś mokry.
- Nie używać w sposób ciągły dłużej niż 30 minut.
- Chronić przed uderzeniami i upadkami.
- Upewnij się, że lampa jest zamocowana w bezpiecznym i stabilnym miejscu.
- Jeśli podczas użytkowania poczujesz dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania lampy.
- Jeśli nałożyłeś na skórę krem lub olejek, musisz zakryć tę część ciała.
- Używaj nieprzerwanie w jednym miejscu przez maksymalnie 30 minut.
- Po użyciu odłącz wtyczkę. Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Nie dotykaj produktu, jeśli masz wilgotne lub mokre ręce.
- Jeśli czyścisz lampę wilgotną ściereczką, lampę należy wysuszyć przed kolejnym użyciem.

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży, dzieci, osób cierpiących na nowotwory, krwawienia, zaburzenia krzepnięcia krwi, oparzenia, uszkodzoną skórę lub słabe krążenie krwi.

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest odpowiedni dla osób wrażliwych na światło, ciepło lub mających wrażliwą skórę.

PARAMETRY

Napięcie wejściowe	110-240V,50Hz/60Hz
Moc znamionowa	30 W
Źródło światła	Diody LED
Długość fali	660nm (Czerwone) and 850nm (bliska podczerwień)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



1. Światła LED

2. Kontroler

3. Adapter

4. Ochraniacze oczu

UŻYTKOWANIE

5. Linki

6. Regulowany drążek statywu

7. Podstawa statywu



1. Przycisk zasilania

2. Tryb

3. Timer

4. Intensywność

5. Wyświetlacz

1. Przycisk zasilania

Jeśli lampa jest wyłączona, naciśnij przycisk, aby włączyć lampę. Jeżeli lampa jest włączona, naciśnięcie przycisku spowoduje miganie lampy. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć lampę.

2. Tryb

Lampa posiada 3 tryby świecenia:

- a. 660 nm + 850 nm LED (światło czerwone i bliska podczerwień)
- b. 660 nm (światło czerwone)
- c. 850 nm (bliska podczerwień)

Po uruchomieniu światło jest włączone. Naciśnij przycisk, aby zmienić tryb.

3. Timer

Timer można ustawić na 6 poziomach: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min.


Wartość domyślna to brak timera. Naciśnij przycisk, aby ustawić timer w cyklu.

4. Intensywność

Do wyboru jest 5 poziomów intensywności: L0 – L4. Ustawienie zmienia się cyklicznie.

MOCOWANIE LINEK

Zaczepek karabińczyki o oczka lampy w sposób pokazany na rysunku.

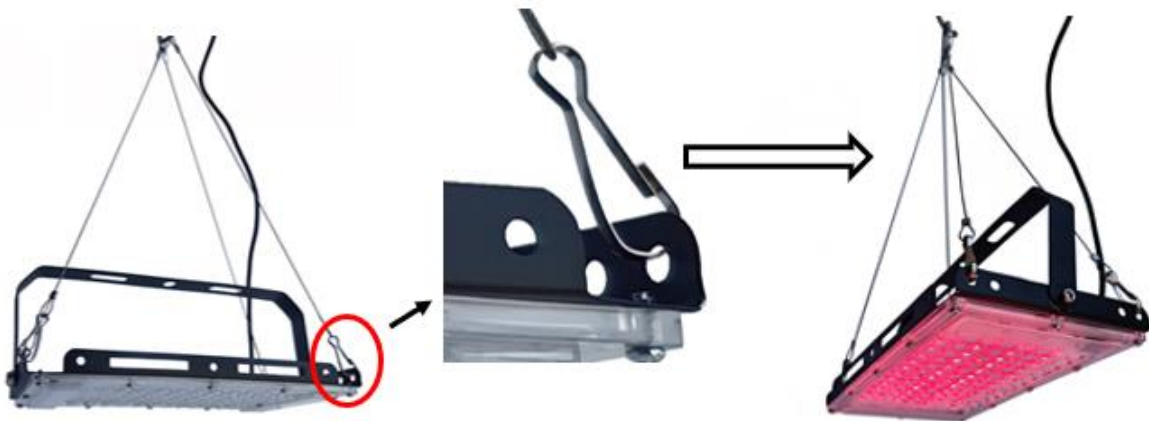

USTAWIENIE NA STOLE

Kąt można regulować za pomocą wspornika z tyłu.



STATYW

Krok 1

Usuń opakowanie i rozłóż nogi stojaka.

Obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby poluzować stojak, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go dokręcić.


Krok 2

Przymocuj lampę do stojaka. Obróć w prawo, aby dokręcić lampę, obróć w lewo, aby poluzować.

Podłącz lampę do adaptera.

Krok 3

Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego. Wybierz tryb, intensywność i czas użytkowania.

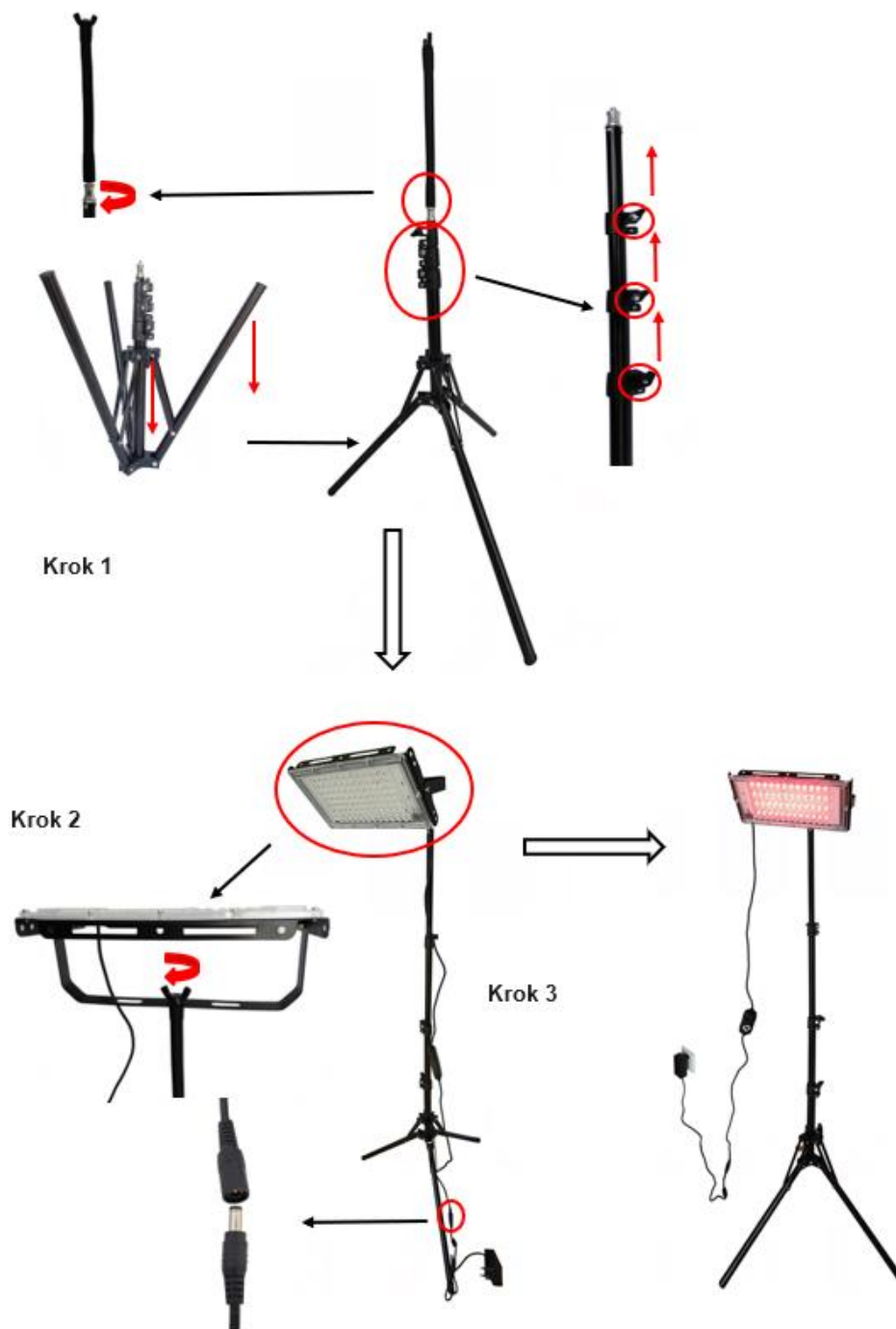

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariantach gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

