



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 27293 Lampa na podczerwień inSPORTline Xamila



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
UŻYTKOWANIE	3
INTENSYWNOŚĆ.....	3
TIMER.....	3
PARAMETRY	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	4
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	5

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używać podczas kąpieli lub w miejscach o dużej wilgotności (baseny, sauny itp.)
- Nie zanurzaj w wodzie.
- Nie używać, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
- Nigdy nie zakrywaj lampy podczas pracy ani nie używaj jej, jeśli jesteś zmęczony.
- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, mogą wystąpić oparzenia.
- Nie patrz bezpośrednio w światło.
- Nie stosować w okolicy narządów płciowych.
- Nie używaj podczas snu lub jeśli nie jesteś odpowiednio wysuszony.
- Nie używaj w sposób ciągły dłużej niż 30 minut.
- Nie naprawiać ani nie modyfikować produktu.
- Unikaj uderzeń i upadków na lampę.
- **OSTRZEŻENIE:** Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży, dzieci, osób cierpiących na nowotwory, krwawienia, zaburzenia krzepnięcia krwi, oparzenia, uszkodzoną skórę lub słabe krążenie krwi.
- **OSTRZEŻENIE:** Produkt nie jest przeznaczony dla osób wrażliwych na światło, ciepło lub mających wrażliwą skórę.

UŻYTKOWANIE

Podłącz lampę do gniazdka. Ustaw intensywność na najniższy poziom.

Umieść lampę w odpowiednim miejscu i masuj okrężnymi ruchami. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, zwiększ odległość między korpusem a żarówką.

Jeśli wystąpi podrażnienie, zaczerwienienie skóry, oparzenia lub zauważysz obrzęk skóry, natychmiast zaprzestań używania produktu i zgłoś się do lekarza.

Jeśli używasz olejków lub kremów, przed użyciem przykryj miejsce ręcznikiem papierowym.

Używaj lampy w jednym miejscu przez maksymalnie 5 minut.

Po użyciu pozostaw lampę do ostygnięcia i odłącz ją. Następnie wyczyść lampę wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym użyciem.

INTENSYWNOŚĆ


Lampa posiada 4 poziomy intensywności: 1 - 50%, 2 - 70%, 3 - 80%, 4 - 100%

Po włączeniu lampa uruchamia się na pierwszym poziomie. Kilukrotne naciśnięcie przycisku start zwiększa intensywność do najwyższego poziomu, a następnie ją wyłącza.

TIMER

Timer ma trzy poziomy: 1 - 10 min, 2 - 30 min, 3 - 40 min.

Włącz lampę i ustaw czas za pomocą przycisku timera. Domyślna wartość po uruchomieniu to 1 (10 min). Po zakończeniu odliczania czasu lampa wyłącza się. Możesz także wyłączyć lampę ręcznie za pomocą przycisku start.

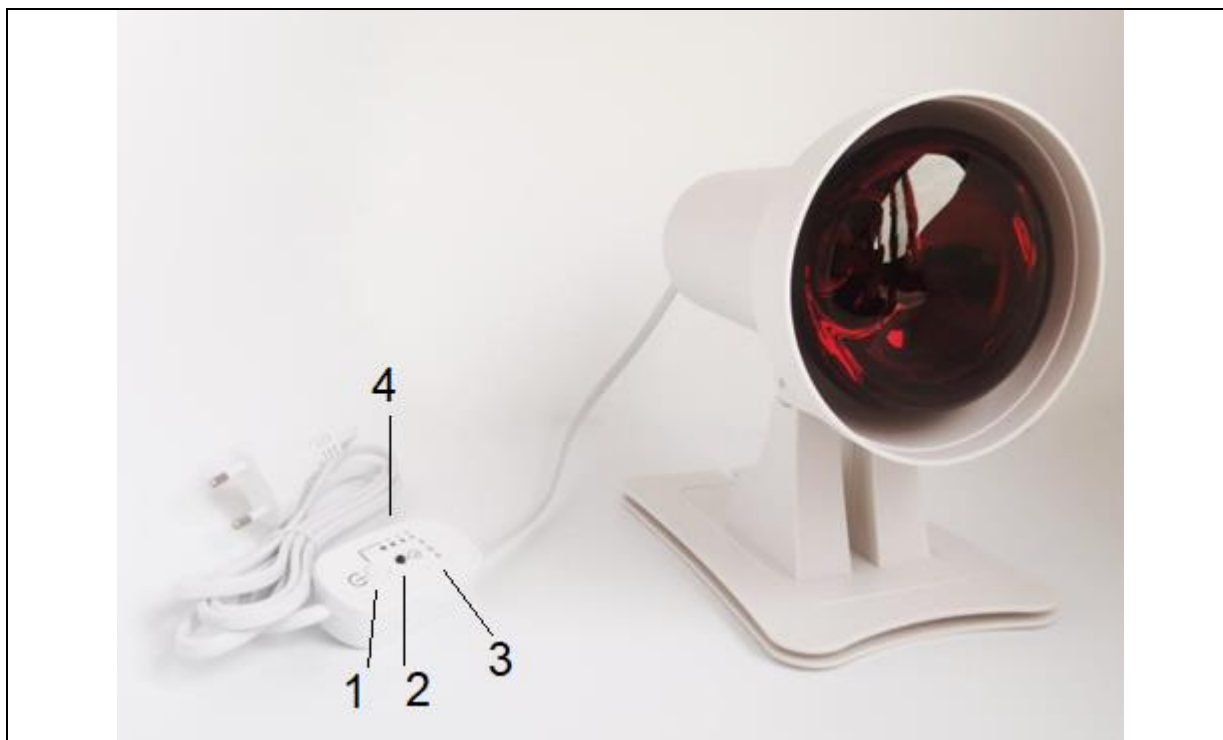

1.	Przycisk włączania / wyłączenia i regulacja intensywności	3.	Wskaźnik czasu
2.	Przycisk timera	4.	Wskaźnik intensywności

PARAMETRY

Napięcie	230V 50Hz/60Hz
Moc	150 W
Typ żarówki	R95
Gwint żarówki	E27
Długość fali	700 – 1400 nm

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

