




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 27604 Lampa LED na twarz inSPORTline Coladome 300

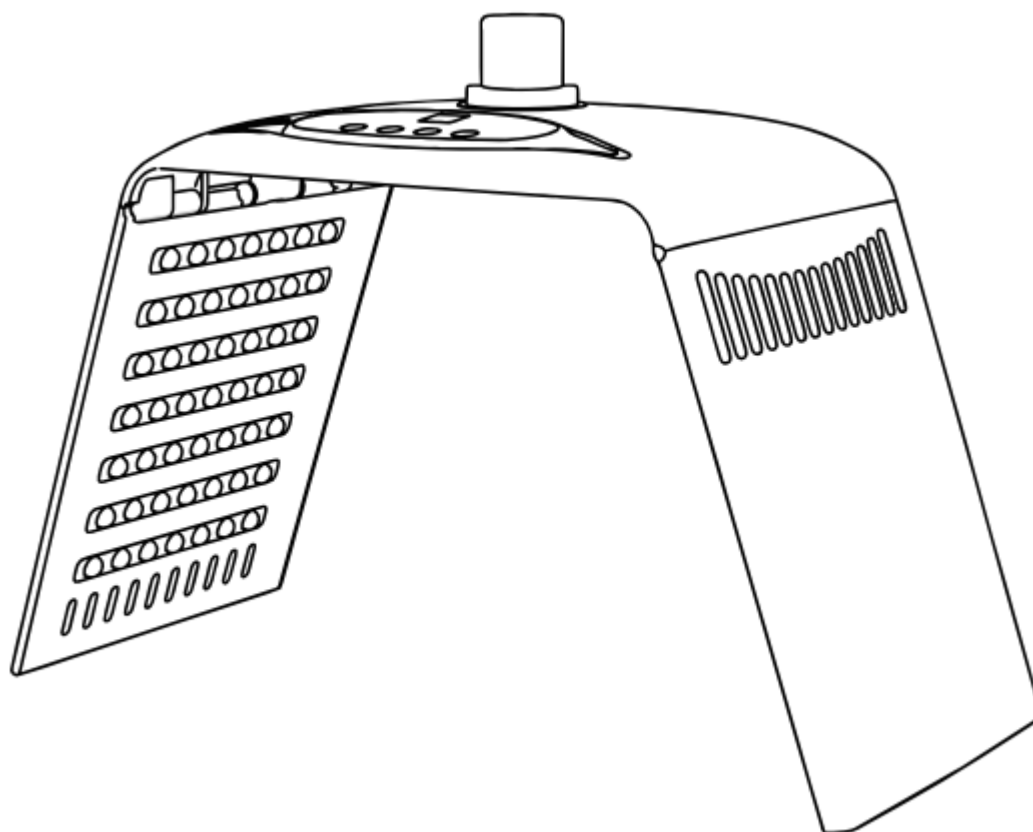

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
ROZKŁADANIE	4
PANEL STEROWANIA.....	5
PARAMETRY	6
KONSERWACJA.....	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Zachowaj instrukcję do wglądu dla innych użytkowników.
- Poinformuj innych użytkowników o podstawowych instrukcjach bezpieczeństwa i użytkowaniu.
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez doświadczoną i pełnoletnią osobę posiadającą wymaganą wiedzę.
- Przed użyciem należy upewnić się, że diody LED i urządzenie nie są uszkodzone.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności (łazienki, sauny, baseny itp.).
- Używać wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Chroń urządzenie przed uderzeniami i upadkami.
- Podczas użytkowania nie używaj innych urządzeń emitujących ciepło.
- Przechowywać poza zasięgiem wody.
- Nie podłączaj do uszkodzonego gniazdka.
- Nie używać, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Odłącz urządzenie w celu konserwacji i czyszczenia.
- Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy natychmiast odłączyć je od prądu.
- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki lub zapach, natychmiast przerwij jego pracę i odłącz je od prądu.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Używaj urządzenia wyłącznie w sposób opisany w instrukcji. Każde inne użycie jest niedozwolone.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Podczas użytkowania nie przykrywać szmatką ani innymi przedmiotami.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Nie stosować, jeśli cierpisz na choroby skóry, problemy z sercem, wysokie ciśnienie krwi, podrażnienia lub wrażliwą skórę.
- Zawsze noś okulary ochronne!
- Zalecana temperatura pracy: 0 - 26°C
- Zalecana temperatura przechowywania 0 - 35°C
- Wilgotność względna: <80%
- Częstotliwość stosowania: można stosować 25-30 minut dziennie przez miesiąc lub po każdym zabiegu kosmetycznym. W ramach leczenia trądziku zalecamy stosowanie go 3 razy w tygodniu, przez co najmniej 25 minut.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



1. Panel sterowania	5. Diody LED
2. Pojemnik na wodę	6. Kabel zasilający
3. Zasilanie	7. Okulary ochronne
4. Wylot pary	

ROZKŁADANIE


Przed rozłożeniem należy wybrać odpowiednie miejsce z dala od źródeł ciepła i innych urządzeń.

Trzymać z dala od światła słonecznego i dużej wilgotności. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o stabilnej temperaturze i wilgotności.



1. Rozłóż obie strony urządzenia i umieść ją na płaskiej i twardej powierzchni.
2. Podłącz przewód zasilający do urządzenia.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
4. Po włączeniu wyświetlacz zaświeci się.

PANEL STEROWANIA

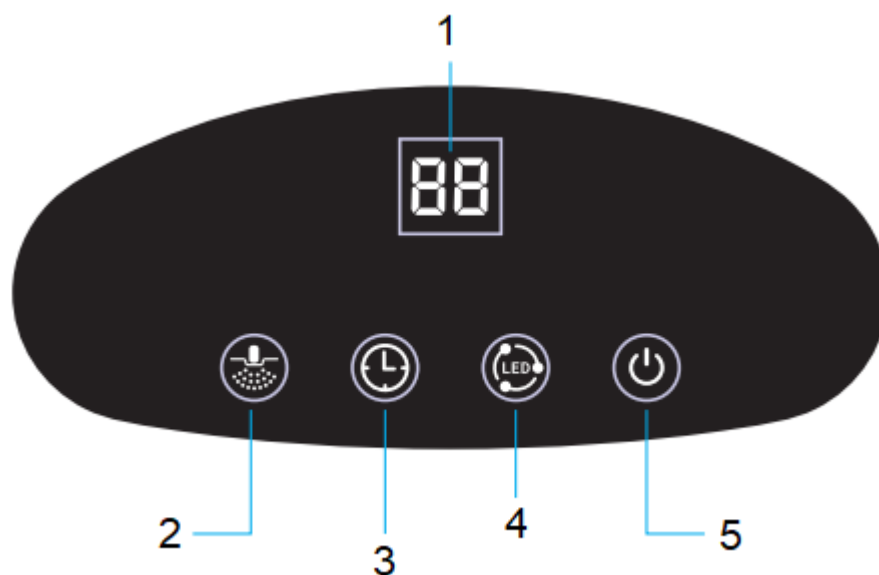

1. Wyświetlacz	4. Światła LED
2. Funkcja pary	5. Wyłącznik zasilania
3. Minutnik	

WŁĄCZANIE

Po podłączeniu do zasilania urządzenie znajduje się w trybie czuwania. Urządzenie uruchamia się poprzez naciśnięcie włącznika zasilania. Zaświeci się wskaźnik LED i 30-minutowy timer.

Aby wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk zasilania.

LED

Naciskając przycisk ustawiający diody LED, można wybrać jedną z 8 opcji.

00 – tryb czuwania

01 – światło czerwone (długość fali 647 – 760 nm)

02 – światło niebieskie (długość fali 430 – 455 nm)

03 – światło zielone (długość fali 492 – 550 nm)

04 – światło żółte (długość fali 550 – 580 nm)

05 – światło pomarańczowe (długość fali 588 – 647 nm)

06 – światło fioletowe (długość fali 360 – 430 nm)

07 – światło turkusowe (długość fali 480 – 490 nm)

08 – światło białe

TIMER

Początkowa wartość timera wynosi 30 minut. Naciskając przycisk można regulować wartość w zakresie 5 minut aż do maksymalnej wartości 60 min.

Zakres ustawień czasu 0 – 60 minut.

Jeżeli wartość nie zostanie skorygowana przez 3 sekundy, urządzenie zacznie pracować na aktualnie ustawionej wartości.



FUNKCJA PARY

Po włączeniu funkcja pary zostaje wyłączona. Naciśnij przycisk, aby przełączać pomiędzy intensywnością (01 najniższa, 03 najwyższa).

Nie wlewaj do pojemnika olejków eterycznych ani innych produktów kosmetycznych. Zalecamy używanie czystej wody.

PARAMETRY

Zasilacz	DC12V, 3A, 50/60 Hz
Moc	Okolo 36W
Wymiary	470x220x345 mm
Waga	1,3 ±10%

KONSERWACJA

- Wytrzyj obudowę urządzenia miękką szmatką.
- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- Złóż urządzenie w celu przechowywania.
- Przed jakąkolwiek obsługą lub przechowywaniem urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnieniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

